

CLINITRADE⁺



Vendajes avanzados
Vendaje especial para heridas

Kliniderm Foam Silicone es un vendaje absorbente en espuma de poliuretano con una capa flexible en silicona que permite el contacto con la herida. Esta capa de contacto protege la piel circundante y reduce el dolor al cambiar el vendaje.

La capa de espuma absorbente absorbe el líquido de la herida y lo captura adentro del vendaje. Además, el líquido de la herida se evapora parcialmente a través del vendaje lo que aumenta la capacidad total de absorción. El vendaje en silicona permite un tratamiento de heridas húmedas. También se puede usar en compresión.

Kliniderm Foam Silicone puede aplicarse igualmente sobre las heridas infectadas a condición que la infección de la herida sea tratada al mismo tiempo conforme a sus directrices aplicables.

Características

- Menos dolor al cambiar el vendaje
- Protege la piel circundante
- Fácil de aplicar (re aplicar)
- Confortable para el paciente
- Ayuda en el tratamiento de heridas húmedas
- El paciente puede ducharse con el vendaje puesto
- Fijación sólida pero sin peligro para la piel



Indicaciones

- Estándar para heridas exudativas de moderadas a severas.
- Listo para heridas levemente exudadas
- Ulceras venosas y arteriales
- Ulceras de decúbito
- Ulceras de pies diabéticos
- Lesiones post operatorias
- Abrasiones y otras lesiones traumáticas.

Espuma Silicona

Código	Formato	Caja / Cartón	Piezas / Caja	adhesivo
40514823	5x5 cm	20	5	No
40514824	10x10 cm	20	5	No
40514825	15x15 cm	20	5	No
40514826	10x20 cm	20	5	No
40514827	20x20 cm	20	5	No

Espuma Silicona borde

Código	Formato	Caja / Cartón	Piezas / Caja	adhesivo
40514828	7.5x7.5 cm	20	5	si
40514829	10x10 cm	20	5	si
40514830	12.5x12.5 cm	20	5	si
40514831	15x15 cm	20	5	si
40514832	10x20 cm	20	5	si
40514833	10x30 cm	20	5	si
40514834	15x20 cm	20	5	si

Espuma Silicona

Código	Formato	Caja / Cartón	Piezas / Caja	adhesivo
40514810	6x8.5 cm	20	5	no
40514811	10x10 cm	20	5	no
40514812	15x15 cm	20	5	no
40514813	20x50 cm	20	5	no

Espuma Silicona Borde ligero

Código	Formato	Caja / Cartón	Piezas / Caja	adhesivo
40514814	4x5 cm	20	5	si
40514815	5x12.5 cm	20	5	si
40514816	7.5x7.5 cm	20	5	si
40514817	10x10 cm	20	5	si
40514818	15x15 cm	20	5	si

Kliniderm Foam

Derivada de la generación más desarrollada de vendajes en espuma, la espuma Kliniderm se utiliza para sanar diversos tipos de heridas exudativas moderadas o severas. El vendaje en espuma absorbente es uno de los vendajes especiales más corrientemente utilizados para las heridas, principalmente en razón de su confort y de su capacidad de absorción. La espuma Kliniderm puede permanecer sobre la herida hasta por 7 días. Es confortable y suave para el paciente y absorbe bastante cantidad de líquido de la herida sin problema de fuga. Así mismo, crea un ambiente húmedo favorable para la rápida cicatrización de la herida. La espuma Kliniderm está disponible en versión sin borde adhesivo y en versión con borde adhesivo (Border).



Características

- Muy absorbente gracias a una absorción directa en la espuma
- Capa superior especial con alta permeabilidad elevada al vapor de agua
- Para su uso, el vendaje se adapta a la lesión
- Previene la maceración
- No se adhiere a la lesión
- Capa adhesiva micro porosa no agresiva para la piel
- Ayuda al tratamiento húmedo de las heridas

Indicaciones

- Heridas exudativas de medianas a severas
- Ulceras venosas y arteriales
- Ulceras de decúbitos
- Ulceras de pies diabéticos
- Quemaduras de primero y segundo grado
- Sitios donantes
- Lesiones post-operatorias
- Abrasiones y otras heridas traumáticas

Código	Formato	Caja / Cartón	Piezas / Caja	adhesivo
4174810	5x5 cm	10	10	no
4174811	10x10 cm	10	10	no
4174812	15x15 cm	10	10	no
4174813	10x18 cm	10	10	no
4174814	20x20 cm	10	10	no

Código	Formato	Caja / Cartón	Piezas / Caja	adhesivo
4174815	7.5x7.5 cm	10	10	si
4174816	10x10 cm	10	10	si
4174817	15x15 cm	10	10	si

Kliniderm silicone wound contact layer presenta una estructura porosa flexible a través de la cual el exudado puede pasar fácilmente para alcanzar el vendaje secundario, reduciendo así el riesgo de maceración. La capa de contacto en silicona asegura un cambio de vendaje indoloro para no alterar la cicatrización de la herida. La capa de contacto **Kliniderm** únicamente tiene una capa de silicona sobre un lado; esto facilita la aplicación de la compresa, incluso con guantes.

Características


- Cicatrización de la herida sin problema y mínimo de dolor cuando se cambia el vendaje.
- Riesgo mínimo de maceración de los contornos de la herida
- El vendaje es transparente, por lo que es posible inspeccionar la herida sin quitar el vendaje.
- La capa de silicona unilateral asegura una aplicación simple e impide la adherencia sobre el vendaje secundario.
- De costo económico

Indicaciones

- Heridas exudativas crónicas tales como las úlceras de pies diabéticos, las úlceras venosas y arteriales, las úlceras de decúbito.
- Quemaduras de primero y segundo grado
- Heridas quirúrgicas
- Heridas traumáticas
- Como capa protectora en caso de terapia por presión negativa
- Puede permanecer sobre la piel hasta por 7 días



Código	Formato	Caja / Cartón	Piezas / Caja
40514880	5x7.5 cm	70	10
40514881	7.5x10 cm	40	10
40514882	10x18 cm	70	10
40514883	20x30 cm	30	5
40514884	17x25 cm	40	5

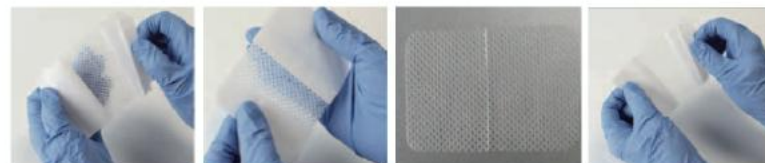

Kliniderm superabsorbent dressing

El vendaje Kliniderm super absorbente se utiliza para sanar las heridas exudativas severas. El vendaje Kliniderm super absorbente consiste en una capa de contacto flexible no tejida que permite que los líquidos de la herida pasen directamente a la parte central absorbente inferior. Esta parte central absorbente está compuesta de polímeros super absorbentes, (SAP). Estos absorben una cantidad muy importante de líquido y de sangre y lo retienen de manera que la herida y sus contornos no estén demasiado húmedos y que se pudiese producir una maceración. El gel formado adentro de la parte central absorbente, proporciona un ambiente húmedo a la herida con el fin que el vendaje no se pegue a la herida. La superficie exterior del vendaje está constituida de una capa azul hidrofóbica, lo que minimiza el riesgo de fuga. La parte central absorbente no está apretada en la compresa por lo que puede inflarse libremente y así absorber una gran cantidad de líquido de la herida. El vendaje super absorbente de Kliniderm puede usarse bajo compresión

Características

- El vendaje absorbe alrededor de 30x su peso en el líquido de la herida
- El lado blanco del vendaje es la capa de contacto de la herida
- La parte central absorbente está compuesta de polímeros super absorbentes (SAP)
- Vendaje estéril



Código	Formato	Caja / Cartón	Piezas / Caja
40511700	7.5x7.5 cm	8	50
40511706	10x10 cm	5	10
40511701	10x10 cm	8	50
40511707	10x15 cm	4	10
40511702	10x20 cm	8	50
40511708	15x20 cm	4	10
40511703	20x20 cm	8	15
40511709	20x25 cm	4	10
40511705	20x40 cm	8	10

Kliniderm film with pad

El vendaje estéril Kliniderm telilla + almohadilla consiste de un soporte en poliuretano y de una compresa no tejida. Es impermeable al agua y a las bacterias, pero permeable al aire, lo que permite que la herida respire evitando cualquier riesgo de infección.

El vendaje es totalmente hipoalergénico y su compresa es muy absorbente y no se adhiere a la herida. Es lo óptimo para recubrir las heridas post-operatorias, exudativas promedio.

Características

- Vendaje estéril
- La capa de poliuretano es muy impermeable al agua y a las bacterias pero está micro perforada para poder conservar un ambiente controlado, así como una cicatrización óptima.
- Vendaje enteramente hipoalergénico y muy absorbente.
- Cicatrización óptima sin riesgo de infección
- El paciente puede ducharse con el vendaje puesto

Indicaciones

- Heridas post operatorias
- Heridas exudativas moderadas



Código	Formato	Caja / Cartón	Piezas / Caja
40514860	5x7.2 cm	6	50
40514861	10x10 cm	6	50
40514862	10x12 cm	6	50
40514863	10x15 cm	6	50
40514864	10x20 cm	6	50
40514865	10x25 cm	6	50
40514866	10x30 cm	6	50
40514867	10x35 cm	6	50



Kliniderm fiber carboximéthylcellulose (CMC) es un vendaje hidroactivo muy absorbente, suave y gelificante. Gracias a su gran capacidad de absorción (vertical), el líquido de la herida se absorbe en el vendaje y se transforma en gel. La conversión crea un ambiente húmedo que favorece el proceso de reparación y el desbrilamiento autolítico. Las fibras muy resistentes de la fibra Kliniderm cmc garantizan que el vendaje pueda ser retirado de la herida de una sola vez cuando se cambia el vendaje. Los desechos se eliminan sin dañar el tejido cuando se quita el vendaje. El objetivo es crear una herida limpia. No quedan residuos en la herida.

Características

- Estimula la cicatrización de la herida creando un ambiente húmedo
- La fuerte capacidad de absorción vertical disminuye el riesgo de maceración de los contornos de la herida
- Se retira de la herida de una sola vez gracias a las fibras fuertes
- Económico en su precio

Indicaciones

- Las heridas exudativas crónicas, de moderadas a severas, tales como las úlceras de pies diabéticos, las úlceras venosas y arteriales y las úlceras de decúbito
- Las heridas quirúrgicas tales como las heridas post operatorias, las heridas de cicatrización secundaria y los sitios donantes
- Quemaduras de segundo grado
- Las heridas traumáticas tales como las raspaduras y los cortes
- Las heridas oncológicas
- Las heridas profundas como por ejemplo las fístulas



Código	Formato	Caja / Cartón	Piezas / Caja
40515020	5X5 cm	5	10
40515021	10x10 cm	5	10
40515022	4x30 cm	10	10
40515023	5x15 cm	10	5
40515024	1x45 cm	10	5
40515025	2x45 cm	10	5

Kliniderm hidrocolloid

Un vendaje hidroactivo estéril para tratar las heridas crónicas y agudas que producen poco líquido o moderado. Kliniderm hidrocoloide no se pega a la herida, lo que reduce el dolor cuando se cambia el vendaje y no daña los tejidos recién formado. El líquido forma un gel al contacto con las secreciones de la herida. Éste mantiene un ambiente húmedo que estimula el proceso de cicatrización fisiológica de la herida.

Características

- Vendaje estéril hidroactivo para heridas
- Crea un ambiente húmedo para las heridas
- Fabricado de una matriz de polímero
- Provisto de una capa superior de espuma de poliuretano/hoja de poliuretano semi-permeable
- Impermeable al agua y a las bacterias
- Puede permanecer sobre la herida durante varios días

Indicaciones

- Heridas crónicas y agudas, que producen cantidades débiles a moderadas de secreciones
- Quemaduras
- Raspaduras
- Sitios donantes
- Ulceras de decúbitos
- Ulcus cruris (úlceras de la pierna)
- Heridas post-operatorias

Kliniderm hidrocoloide está disponible en diferentes versiones:

- Kliniderm hidrocoloide delgado: vendaje muy fino transparente, hidroactivo para sanar las heridas que producen pocas secreciones
- Kliniderm hidrocoloide estándar: conveniente para tratar las heridas que producen una cantidad moderada de secreciones
- Kliniderm hidrocoloide estándar border: es un hidrocoloide estándar con borde de fijación suplementaria



Código	Formato	Caja / Cartón	Piezas / Caja	adhesivo
4174101	7.5x7.5 cm	60	5	no
4174101	10x10 cm	60	5	no
4174101	15x15 cm	60	5	no

Código	Formato	Caja / Cartón	Piezas / Caja	adhesivo
4174302	10x10 cm	20	5	no
4174303	15x15 cm	10	5	no
4174201	7x7 cm	20	5	si
4174202	10x10 cm	20	5	si
4174203	14x14 cm	10	5	si

Kliniderm Klinitulle ointment compress

Klinitulle es una compresa no tejida (o gasa gruesa) adaptada para sanar las heridas superficiales tales como las raspaduras, las quemaduras de segundo grado con ampolla intacta o en caso de extracciones de la uña.

El uso de Klinitulle reduce el riesgo de que el vendaje secundario (recubierto) se adhiera a la herida, previene la deshidratación de la herida y conserva suaves los contornos de la herida.

Características

- Impregnado de parafina blanca
- Fabricado en material suave, no tejido
- Klinitulle debe ser cambiado todos los días



Código	Formato	Caja / Cartón	Piezas / Caja
4170097	5x5 cm	24	10
4170098	10x10 cm	24	10
4170099	10x30 cm	10	20

Kliniderm hidrogel

El Kliniderm hidrogel se utiliza para sanar diversas heridas crónicas con necrosis y/o fibrinosis para las heridas que necesitan un tratamiento húmedo. El hidrogel crea un ambiente húmedo, hidrata la herida y retiene la humedad. Es esencial para una cicatrización rápida y eficaz de las heridas. Además, el hidrogel Kliniderm estimula el desbridamiento autolítico y se usa para ablandar la necrosis negra o disolver la fibrinosis amarilla. En la fase “roja”, un hidrogel se aplica para proteger los tejidos vulnerables de granulación. En el caso de heridas profundas, el hidrogel llena los espacios “muertos”, lo que es importante para prevenir la infección. En vista que el hidrogel se compone principalmente de agua, tiene también un efecto refrescante y anti-dolor.

Características

- Hidrogel transparente compuesto de 85% de agua
- El gel permanece en su lugar gracias a su estructura compacta
- Favorece la capacidad de auto-limpieza de la herida
- Crea un ambiente húmedo para la herida
- Protege y refresca la herida, la calma en caso de dolor, crea un ambiente húmedo para las heridas.



Código	Formato	Caja / Cartón	Piezas / Caja
40511000	tubo de 8 gms	10	10

Klinibond

El Pegamento Cutaneo Klinibond es conveniente para cerrar las lesiones (recortes) limpios y agudos. La aplicación de Klinibond es indolora, rápida y fácil. No es necesario aliviar el dolor. Klinibond puede aplicarse en una sola capa y es fácil de dosificar. No es necesario cubrir la herida. El paciente puede lavarse o ducharse poco tiempo después del tratamiento. La ventaja de este tratamiento reside en el hecho que no hace falta retirar puntos de sutura posteriormente. Además, el cierre de la herida con el pegamento cutáneo Klinibond, permite un cierre confiable de la herida con un hermoso resultado estético.

Características

- Pegamento cutáneo transparente a base de n-butyl-cyanoacrylate
- Entregado en una ampolleta de plástico
- Dotado de un solo aplicador y práctico para una aplicación muy precisa.
- Almacenar en el refrigerador



Código	Formato	Caja / Cartón	Piezas / Caja
115500	0.5 gms con aplicador	10	10

CLINITRADE⁺

BEATRIZ ASTURIAS URIGÜEN

Representante para Centroamerica

beatrizasturiasu@gmail.com

Strive not to be a success,
but rather to be of **value**.